



Semi Orthopedische Kinderschoenen

Concepts & Essentials 2016 / 2017



Wat is Pedro Concepts?	4 - 5
Materialen en beschikbare kleuren	6
Bestelproces	7
Stap 1 Constructiestypes	8 - 9
Stap 2 Conversieschema	10 - 11
Stap 3 Bepaal uw maat	12
Stap 3 - 4 Aanpassingen en bestelling plaatsen	13
Concepts Collectie	
Op bestelling gemaakt	
Maat 15 - 21 Productoverzicht	14 - 17
Maat 18 - 26 Productoverzicht	18 - 25
Maat 24 - 36 Productoverzicht	26 - 45
Maat 34 - 42 Productoverzicht	46 - 57
Maat 18 - 46 Productoverzicht	58 - 64
Essentials Collectie	
Bestel direct uit de voorraad	
Wat is Pedro Essentials?	65 - 66
Essentials Productoverzicht	68 - 77
Voetbedden & Accessoires	78 - 87
Aanpassingen & Reparaties	88 - 89
Uw bestelling plaatsen	90

Piedro® is een toonaangevende Nederlandse producent van hoogwaardige Therapeutisch en Semi Orthopedische schoenen.

Wat is Pedro Concepts?

Onze gloednieuwe concepts collectie is volledig op bestelling gemaakt, met de meeste getoonde modellen verkrijgbaar in alle 4 onze constructietype:

Revalidatie

Korset

Orthese schoen

Anti-Varus

Onze **revalidatie** en **korset** schoenen zijn verkrijgbaar in 8 breedte maten, **anti-varus** modellen zijn verkrijgbaar in breedte 4½ en 6½ en ons **orthese** modellen zijn verkrijgbaar in small, medium en large, afhankelijk van de maat **orthese** die in de schoen moet passen.

Alleen onze modellen in de categorie **15 - 21** en sandalen hebben beperkte breedte en constructietypes wat duidelijk op elke pagina wordt aangegeven. Omdat onze Concepts collectie op bestelling wordt gemaakt kunt u vereiste aanpassingen zoals een hakverhoging aan uw bestelling toevoegen tegen een meerprijs. Wanneer uw schoenen in productie zijn worden deze aanpassingen toegevoegd voor de best mogelijke afwerking waarmee u tijd en geld bespaart. Alle schoenen uit onze Concepts collectie worden binnen **14 - 21 dagen geleverd**.



15 - 21

18 - 26

24 - 36

32 - 42

18 - 46

Onze collectie is speciaal ontwikkeld voor specifieke maten en leeftijden waarbij voor elke categorie alle verkrijgbare modellen in elke groep worden vermeld. Dit maakt het heel eenvoudig om het perfecte model voor uw maat te vinden.

Heeft u snellere levering nodig?

Zo ja, bekijk dan onze Essentials collectie uit de voorraad (pagina **68 - 77**) met klassieke en de best verkopende Pedro® modellen met een levering tussen **2 - 3 werkdagen**. Mocht u hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team van de **klantenservice** op **010 521 5211**, zij zijn u graag van dienst.



Wat zijn semi-orthopedische therapeutische schoenen?

Semi-orthopedische schoenen worden fabrieksmatig geproduceerd en zijn verkrijgbaar in een grote variëteit van uitvoeringen en modellen. Wanneer een normale confectie schoen niet voldoende ondersteuning aan de voeten geeft of wanneer er behoefte is om orthopedische aanpassingen te maken in of aan de schoen wordt er gekozen voor semi-orthopedische schoenen. Semi-orthopedische schoenen worden gemaakt op hiervoor speciaal ontwikkelde leesten die extra ruimte geven voor op maat gemaakte voetbedden waarmee de voet gecorrigeerd kan worden en zijn verkrijgbaar in het geval van Pedro® tot wel 8 verschillende breedte maten zodat er voor bijna iedereen een goed passende schoen geleverd kan worden.

In sommige gevallen kan er binnen de constructie van de schoen niet voldoende ondersteuning gecreëerd worden voor de voet en enkel en worden er door de orthopedisch schoen- en/of instrumentmaker enkel-voet orthesen gemaakt. Deze passen vanwege het extra benodigde volume niet in een confectie schoen, hiervoor zijn er speciale orthese schoenen ontwikkeld waarbij de extra ruimte voor de orthese is ingebouwd in de leest.

Om ook problemen op te kunnen lossen door de schoen aan te passen zoals bijvoorbeeld bij een beenlengte verschil of de noodzaak voor een afwikkelfoorziening maakt Pedro® een brede collectie van modellen die volgens de flexibele maakwijze zijn gemaakt. Hierbij wordt tussen het bovenwerk en de loopzool een tussenzool gemonteerd die er voor zorgt dat de loopzool eenvoudig van het bovenwerk afgehaald kan worden en er een orthopedische voorziening gemonteerd kan worden.


Goede passende en ondersteunende schoenen zijn essentieel voor een goede ontwikkeling van de kindervoet. Het dragen van schoenen met de juiste lengte- en breedtemaat helpen niet alleen om de voet goed te beschermen maar ook om pijn te verlichten en elke stap comfortabel te maken, dat is waar Pedro® al bijna 60 jaar voor staat.

Piedro® gebruikt alleen de beste kwaliteit leer, materialen en onderdelen voor de hoogst mogelijke kwaliteit, afwerking en ondersteuning.

Materialen en beschikbare kleuren

Kleuren kunnen afwijken als gevolg van het printproces.

Nubuck	Geoliede Nubuck	Leer	Lakleer
 Zwart	 Zwart	 Zwart	 Zwart
 Donkerblauw	 Donkerbruin	 Donkerblauw	 Donkerblauw
 Donkerbruin	 Oranje	 Donkerbruin	 Rood
 Grijs	 Cognac	 Cognac	 Fuchsia
 Kobalt		 Grijs	
 Rood		 Kobalt	
 Paars		 Rood	
 Camel		 Paars	
 Beige		 Fuchsia	
 Fuchsia		 Lichtblauw	
		 Mint	
		 Roze	
		 Wit	

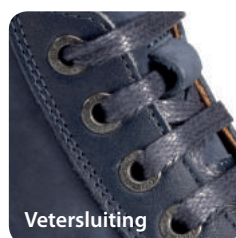

Welkom bij het 4 stap bestelproces van Piedro®, een eenvoudig te volgen, stapsgewijze gids voor het kiezen van het perfecte paar Piedro® schoenen.

1.

Kies uw constructietype

Piedro® biedt 4 verschillende type schoenen, elk type verschilt qua constructie en daarmee van ondersteunings en aanpassings niveau. Ga naar pagina 8 en 9 als u niet zeker weet welk constructietype u nodig heeft. Hier vindt u gedetailleerde informatie om u te helpen kiezen, waaronder constructiediagrammen en indicaties voor gebruik. Ga naar [stap 2](#) als u het benodigde constructietype heeft gevonden.

2.

Meet uw voet lengte en breedte

Ga naar [stap 3](#) als u uw schoenmaat en benodigde breedte al weet.
Ga naar pagina 12 als u meer wilt weten over hoe u voor Piedro® schoenen moet meten.

Als u de maten weet, gaat u naar het model overzicht op pagina 14 tot 64 om uw favoriete model te kiezen.
Noteer de maat, breedte, het modelnummer en de kleur van het model dat u hebt gekozen en ga dan verder met [stap 3](#).

3.

Aanpassingen, voetbedden of beide?

Ga door met [stap 4](#) als u geen aanpassingen en/of voetbedden nodig heeft.

Aanpassingen

Het voordeel van onze Concepts collectie is dat alle modellen in deze catalogus op bestelling gemaakt worden. Daarom kunnen wij wanneer u aanpassingen nodig heeft deze aanpassingen toevoegen aan uw schoenen tijdens het productieproces, dit zorgt voor de best mogelijke afwerking. Ga naar pagina 88 en 89 van onze catalogus voor meer informatie en een volledige lijst van onze aanpassingen.

Zolen

Voor onze Concepts collectie kunt u de zool selecteren die het best voor u werkt. Zie ons aanbod op de bijlage van de omslag en kies uw favoriete zool.

Voetbedden

Piedro® biedt een ruime keuze aan voetbedden en inlegzolen. Als u voetbedden nodig heeft kunt u deze aan uw bestelling toevoegen, deze worden zo gemaakt dat ze perfect bij uw Piedro® schoenen passen en worden vervolgens samen met uw bestelling verstuurd. Meer informatie over de verschillende types kunt u vinden op pagina 78 tot 85.

Ga door met [stap 4](#) als u uw keuze heeft gemaakt.

4.

Uw bestelling plaatsen

Nu zou u alle benodigde informatie voor het plaatsen van uw bestelling moeten hebben! Constructietype, schoenmaat, breedte, modelnummer, kleurnummer en eventuele aanpassingen en/of inlegzolen.

U kunt eenvoudig bij ons bestellen door te bellen, faxen, e-mailen of door uw bestelling online te plaatsen. Raadpleeg onze contactinformatie op pagina 90 om uw bestelling te plaatsen.



1. Zachte vulling rond het hielmanchet voor een betere pasvorm
2. Tweezijdig verlengde contreforts voor betere mediale en laterale stabiliteit
3. Volledig leren binnenzool
4. Eenvoudig afneembare, aanpasbare en slijtvaste loopzool
5. Voldoende teensprong voor eenvoudige afwikkeling

6. Uitneembaar kurken geprofileerd voetbed
7. Veel teenruimte en sterke verstevigde neus ter bescherming van de tenen.
8. Verlengde sluiting voor maximale toegankelijkheid
9. Extra polstering rond de enkel voor meer comfort
10. Zachte tongvulling om de schoen goed rond de voet te vormen

Revalidatie

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in breedte 1½ tot 8½
- Gemaakt op verdiepte leesten
- Mediaal en lateraal verlengde contreforts voor extra stabiliteit
- Uitneembare, anatomisch gevormde voetbedden
- Geschikt voor aanpassingen

Indicaties voor gebruik:

- Kinderen die schoenen met extra ondersteuning nodig hebben
- Neurofysiologische problemen
- Varus- of valgus-instabiliteit
- Pijnlijke of drukgevoelige voeten
- Platvoeten
- Lichte cerebrale parese (CP)
- Extreem smalle of brede voeten



1. Zachte vulling rond het hielmanchet voor een betere pasvorm
2. Een hoge en extra lange contrefort om de enkel te ondersteunen
3. Volledig leren binnenzool
4. Eenvoudig afneembare en aanpasbare (slijtvaste) loopzool
5. Voldoende teensprong voor eenvoudige afwikkeling

6. Uitneembaar kurken geprofileerd voetbed
7. Veel teenruimte en sterke verstevigde neus ter bescherming van de tenen.
8. Verlengde sluiting voor maximale toegankelijkheid
9. Extra polstering rond de enkel voor meer comfort
10. Zachte tongvulling om de schoen goed rond de voet te vormen

Korset

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in breedte 1½ tot 8½
- Fixeert de subtalaire gewrichten en stabiliseert het talocrurale gewricht
- Gemaakt op verdiepte leesten
- Hoge en verlengde korset contreforts
- Uitneembare, anatomische voetbedden
- Geschikt voor aanpassingen

Indicaties voor gebruik:

- Kinderen die schoenen met extra schacht verstijving nodig hebben
- Voeten met extreme varus of valgus instabiliteit
- Cerebrale palsy (CP)
- Gedeeltelijke of volledige verlamming van het malleolus gebied
- Beperkte dorsiflexie
- Aantasting van het talocrurale gewricht
- Problemen met gewrichtsbanden in de onderste ledematen
- Pijnlijke of drukgevoelige voeten
- Gevoelstoornissen



1. Zachte polstering om de EVO te fixeren
2. Speciaal gevormde verlengde contrefort met extra ruimte achter om de EVO in te plaatsen
3. Volledig leren vlakke binnenzool om te zorgen dat de EVO in een hoek van 90° geplaatst kan worden
4. Eenvoudig afneembare en aanpasbare lichtgewicht loopzool met antipronatiefunctie

Orthese Schoen

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in breedte Smal - Medium - Large
- Gemaakt op specialistische schoenleesten om ervoor te zorgen dat de correcte positie van het onderbeen in 90° gehandhaafd blijft
- Aanvullende ruimte aan de voorzijde en hiel
- Voor confectie of maatwerk orthesen
- Geschikt voor aanpassingen

Indicaties voor gebruik:

- Om een enkel-voetorthese (EVO) te accommoderen
- Om een binnenschoen te accommoderen

5. Duurzame afneembare volledig rubberen antislip zoolplaat
6. Voldoende teensprong voor eenvoudig afrollen
7. Hoge teenruimte en sterke verstevigde neus ter bescherming van de tenen.
8. Verlengde sluiting voor maximale toegankelijkheid
9. Zachte tongvulling om de schoen goed rond de voet te vormen
10. EVO - Enkel voetorthese



1. Zachte profilering rond het hielmanchet voor een betere pasvorm
2. Een speciale verlengde contreforts met gebogen wand om de voetvorm te corrigeren
3. Volledig leren binnenzool
4. Eenvoudig uitneembare en aanpasbare (slijtvaste) loopzool
5. Voldoende teensprong voor eenvoudig afwikkelen

Anti-Varus

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in de breedte 4½ en 6½
- Geabduceerde leestvorm
- Verlengde mediale contrefort met keerwand om te voorkomen dat de voet verder in adductie gaat
- Gemaakt op verdiepte leesten
- Uitneembare, anatomische voetbedden
- Geschikt voor aanpassingen

Indicaties voor gebruik:

- Klompvoet of om de postoperatieve klompvoet te stabiliseren
- Extreme varus en/ of adductie van de voet
- Om de piekpositie in het bovenste tarsale gewricht (*pes equino-varus*) te corrigeren
- Om varus-kanteling in het onderste tarsale gewricht en het voorste metatarsale gebied (*pes varus*) te corrigeren
- Om abductie van de midden en voorvoet te stimuleren
- Om afzet van de tenen te verbeteren

6. Uitneembaar kurken geprofileerd voetbed
7. Hoge teenruimte en sterke veiligheidsneus voor bescherming van de tenen
8. Verlengde sluiting voor maximale toegankelijkheid
9. Extra polstering rond de enkel voor meer comfort
10. Zachte tongvulling om de schoen goed rond de voet te vormen

Piedro® conversieschema
voor maten en wijdte

Schoenmaat		Binnenlengte	Gemiddelde voet lengte	Meetveld	Wijdte: 1½ XX Smal		Wijdte: 2½ X Smal	
GB	EU	Lengte (mm)	Lengte (mm)	Lengte (mm)	Omvang. cm	Breedte. mm	Omvang. cm	Breedte. mm
0,5	15	100	90	87 - 93	10,85	41	11,35	43
1	16	106	96	94 - 99	11,25	43	11,75	45
1,5	17	113	102	100 - 105	11,65	44	12,15	46
2,5	18	120	109	106 - 112	12,05	46	12,55	48
3	19	127	115	113 - 118	12,45	48	12,95	50
4	20	133	121	119 - 124	12,85	49	13,35	51
5	21	140	128	125 - 131	13,25	51	13,75	53
5,5	22	147	134	132 - 137	13,65	53	14,15	55
6	23	153	140	138 - 143	14,05	55	14,55	57
7	24	160	147	144 - 150	14,45	56	14,95	58
8	25	167	153	151 - 156	14,85	57	15,35	59
8,5	26	173	159	157 - 162	15,25	59	15,75	61
9,5	27	180	166	163 - 169	15,65	60	16,15	63
10	28	187	173	170 - 176	16,05	62	16,55	64
11	29	193	179	177 - 182	16,45	63	16,95	65
12	30	200	185	183 - 188	16,80	65	17,30	66
12,5	31	207	192	189 - 195	17,15	66	17,65	68
13,5	32	213	198	196 - 201	17,50	67	18,00	69
1	33	220	205	202 - 208	17,90	69	18,40	71
2	34	227	212	209 - 215	18,30	70	18,80	72
2,5	35	233	218	216 - 221	18,70	72	19,20	74
3,5	36	240	225	222 - 228	19,10	73	19,60	75
4	37	247	232	229 - 235	19,50	75	20,00	77
5	38	253	238	236 - 241	19,90	76	20,40	78
6	39	260	245	242 - 248	20,30	78	20,80	80
6,5	40	267	252	249 - 255	20,75	79	21,25	81
7,5	41	273	258	256 - 261	21,15	81	21,65	83
8	42	280	265	262 - 268	21,60	83	22,10	85
9	43	287	272	269 - 275	22,00	84	22,50	87
10	44	293	279	276 - 282	22,40	86	22,90	88
10,5	45	300	285	283 - 288	22,80	88	23,30	89
11,5	46	307	292	289 - 295	23,20	89	23,70	91

Wijdte: 3½ Smal		Wijdte: 4½ Medium		Wijdte: 5½ Breed		Wijdte: 6½ X breed		Wijdte: 7½ XX breed		Wijdte: 8½ XXX breed	
Omvang. cm	Breedte. mm	Omvang. cm	Breedte. mm	Omvang. cm	Breedte. mm	Omvang. cm	Breedte. mm	Omvang. cm	Breedte. mm	Omvang. cm	Breedte. mm
11,85	45	12,35	47	12,85	49	13,35	51	13,85	53	14,35	55
12,25	47	12,75	48	13,25	50	13,75	52	14,25	54	14,75	56
12,65	48	13,15	50	13,65	52	14,15	54	14,65	56	15,15	58
13,05	50	13,55	52	14,05	54	14,55	56	15,05	57	15,55	59
13,45	52	13,95	54	14,45	55	14,95	57	15,45	59	15,95	61
13,85	53	14,35	55	14,85	57	15,35	59	15,85	60	16,35	62
14,25	55	14,75	57	15,25	58	15,75	60	16,25	62	16,75	64
14,65	57	15,15	58	15,65	60	16,15	62	16,65	64	17,15	66
15,05	58	15,55	60	16,05	62	16,55	64	17,05	65	17,55	67
15,45	59	15,95	61	16,45	63	16,95	65	17,45	67	17,95	69
15,85	61	16,35	63	16,85	65	17,35	67	17,85	68	18,35	70
16,25	63	16,75	65	17,25	67	17,75	68	18,25	70	18,75	72
16,65	65	17,15	66	17,65	68	18,15	70	18,65	71	19,15	73
17,05	66	17,55	68	18,05	70	18,55	71	19,05	73	19,55	75
17,45	67	17,95	69	18,45	71	18,95	73	19,45	74	19,95	76
17,80	69	18,30	71	18,80	73	19,30	74	19,80	76	20,30	78
18,15	70	18,65	72	19,15	74	19,65	76	20,15	78	20,65	80
18,50	71	19,00	73	19,50	75	20,00	78	20,50	79	21,00	81
18,90	73	19,40	75	19,90	77	20,40	79	20,90	81	21,40	83
19,30	74	19,80	76	20,30	78	20,80	81	21,30	82	21,80	84
19,70	76	20,20	78	20,70	80	21,20	82	21,70	83	22,20	85
20,10	77	20,60	79	21,10	81	21,60	83	22,10	85	22,60	87
20,50	79	21,00	81	21,50	83	22,00	85	22,50	86	23,00	88
20,90	80	21,40	82	21,90	84	22,40	86	22,90	88	23,40	90
21,30	82	21,80	84	22,30	86	22,80	88	23,30	89	23,80	91
21,75	84	22,25	86	22,75	88	23,25	89	23,75	91	24,25	93
22,15	85	22,65	87	23,15	89	23,65	91	24,15	92	24,65	94
22,60	87	23,10	89	23,60	90	24,10	92	24,60	94	25,10	96
23,00	89	23,50	90	24,00	91	24,50	94	25,00	96	25,50	98
23,40	90	23,90	91	24,40	93	24,90	96	25,40	97	25,90	99
23,80	91	24,30	93	24,80	95	25,30	97	25,80	98	26,30	100
24,20	93	24,70	95	25,20	97	25,70	98	26,20	100	26,70	102

Bepaal uw voet schoenmaat en breedte

Piedro® modellen zijn verkrijgbaar in 32 maten, van 15 tot 46, met elk model verkrijgbaar in maximaal 8 breedte maten. Het is heel eenvoudig om precies uit te vinden welke maat en breedte u nodig heeft met behulp van onze maattabel op pagina 10 - 11.

Hoe bepaalt u uw schoenmaat?

Bekijk de twee diagrammen (Fig. A, Fig B, en Fig. C) om te zien waar u moet meten voor voetbreedte, omvang en lengte. Neem deze drie metingen (zoals getoond) in centimeters en noteer ze voor later. Vind uw lengtemeting met behulp van het schema op pagina 10 - 11

Zoek vervolgens op de pagina tot u de breedtemaat vindt die het dichtst bij uw eigen breedte meting komt. Nu heeft u de benodigde gegevens die u nodig heeft om uw Piedro® model te kiezen.

Als u hulp of advies nodig heeft met de maatvoering van Piedro®schoenen, neem dan gerust contact op met ons team van de **klantenservice** op **010 521 5211**, zij helpen u graag.

Piedro® heeft ook meetlatten die u kunt aanschaffen om te helpen bij metingen van de voet, deze vindt u in ons gedeelte 'accessoires' op pagina 87.

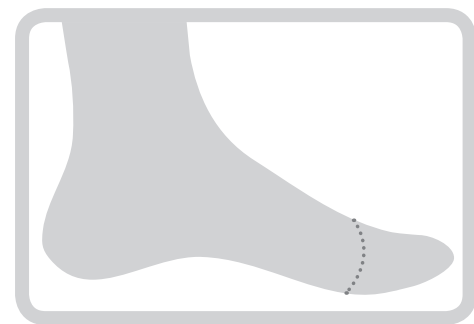


Fig A. Omvang meting

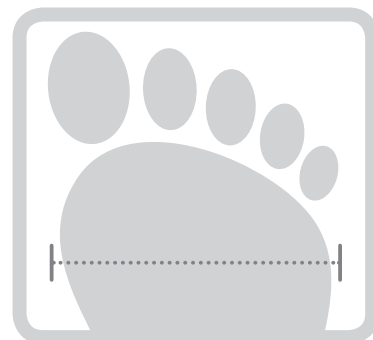


Fig B. Breedte meting

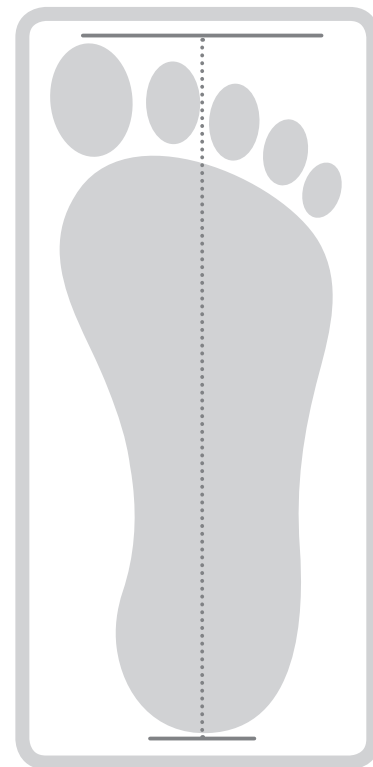


Fig C. Lengte meting

3. Aanpassingen, voetbedden of beide?

Ga door met stap 4 als u geen aanpassingen aan de schoenen of voetbedden nodig heeft.

Aanpassingen

Het voordeel van onze Concepts collectie is dat alle modellen in deze catalogus op bestelling worden gemaakt. Als u aanpassingen zoals bijvoorbeeld een zoolverhoging nodig heeft worden deze aanpassingen gemaakt tijdens het productieproces. Dit zorgt voor de best mogelijke afwerking. Ga naar pagina 88 en 89 van onze catalogus voor meer informatie en een volledige lijst van alle aanpassingen die mogelijk zijn.

Loopzolen

Voor onze Concepts schoenen collectie kunt u de zool selecteren die het best voor u werkt. Zie onze reeks op de bijlage van de omslag en kies uw stijl.

Voetbedden

Als u voetbedden nodig heeft, kunt u deze aan uw bestelling toevoegen, deze worden zo gemaakt dat ze perfect bij uw Piedro® product passen en worden samen met uw bestelling verstuurd. Piedro® biedt een ruime selectie aan voetbedden. Meer informatie over de types kunt u vinden op pagina 78 tot 85.

4. Uw bestelling plaatsen

U kunt uw bestelling plaatsen door te bellen, e-mailen, faxen, per post of door het online te plaatsen!



010 521 5211



010 521 4961



www.piedro.com



klantenservice.nl@piedro.nl



Piedro Nederland B.V.
Jan van der Heydenstraat 18 - 20
2665 JA Bleiswijk
Nederland



15 - 21

Maatrange

6 - 18 maanden

De meeste kinderen leren lopen rond hun eerste verjaardag hoewel sommigen dit maanden eerder of later leren. Als uw kind begint te kruipen, staan en lopen heeft hij/zij misschien extra breedte, diepte en ondersteuning nodig van zijn/haar schoenen, en toch genoeg flexibiliteit om vrij te kunnen bewegen.

De modellen in dit gedeelte zijn ontworpen en geschikt voor kinderen met weinig spierspanning, premature baby's, teenlopers en kinderen die extra voetcontrole en ondersteuning nodig hebben.


Kenmerken:

- Volgt de natuurlijke vorm van de voet
- Biedt alle hiel- en teenruimte die nodig is, zodat de voet zich natuurlijk kan ontwikkelen
- Biedt stabiliteit, waardoor het kind vertrouwen krijgt
- Helpt het evenwicht te verbeteren
- Lichtgewicht constructie
- Flexibele antislip loopzool
- Opent tot aan de teen
- Gemaakt van hoogwaardig leer en hoogwaardige onderdelen voor ademend vermogen, comfort en slijtvastheid
- Minimale naden om wrijving te voorkomen
- Verkrijgbaar in maten 15 – 21
- Verkrijgbaar in breedte 3½ en 5½


Model 2299

maten 15 - 21
6 - 18 maanden

Revalidatie

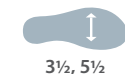

Korset

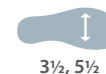

9900
Leer - Wit



5600
Leer - Donkerblauw



0100
Leer - Fuchsia



6500
Leer - Rood



Klittenband Model
Leer - Wit

Klittenband Modellen:


☐	Leer - Wit	9900
☒	Leer - Donkerblauw	5600
☐	Leer - Fuchsia	0100
☐	Leer - Rood	6500

* Het is niet mogelijk om de zool van dit model te wijzigen of aan te passen.

Model 2309

maten 15 - 21
6 - 18 maanden

Revalidatie

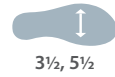

Korset



4537
Nubuck - Paars



0137
Nubuck - Fuchsia



Klittenband Model
Nubuck - Fuchsia



9837
Nubuck - Zwart

Klittenband Modellen:


■	Nubuck - Paars	4537
■	Nubuck - Fuchsia	0137
■	Nubuck - Zwart	9837

* Het is niet mogelijk om de zool van dit model te wijzigen of aan te passen.

Model 2301

maten 15 - 21
6 - 18 maanden

Revalidatie

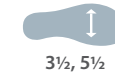

Korset



5736
Leer - Kobalt Combi



6536
Leer - Rood Combi



5636
Leer - Donkerblauw Combi



1536
Leer - Donkerbruin Combi



Klittenband Model
Leer - Donkerblauw Combi

Klittenband Modellen:

■	Leer - Kobalt Combi	5736
■	Leer - Rood Combi	6536
■	Leer - Donkerblauw Combi	5636
■	Leer - Donkerbruin Combi	1536

* Het is niet mogelijk om de zool van dit model te wijzigen of aan te passen.

18 - 26 Maatrange

18 - 36 maanden

Ontworpen voor kinderen in de leeftijd van 18 maanden tot 3 jaar, perfect voor kinderen die al staan en met meer zelfvertrouwen beginnen te lopen. Dit is ook de tijd dat diverse spieren, pezen en gewrichtsbanden zich beginnen te ontwikkelen en mogelijk kunnen hier problemen optreden zoals tenenloop (*pes equinus*), pronatie O-benen (*genu varum*), X-benen (*genu valgum*) of naar binnen/ buiten gedraaide voeten.

Verkrijgbaar in een brede reeks lichte, kleurrijke en leuke ontwerpen die kinderen graag zullen dragen en die toch alle ondersteuning en ruimte bieden die ontwikkelende voeten nodig hebben.

Kenmerken:

- Extra zoolrigiditeit voor meer voetondersteuning
- Ondersteunt de malleoli en helpt het enkelgewricht te controleren
- Helpt een goede houding te bevorderen
- Biedt alle hiel- en teenruimte die nodig is zodat de voet zich natuurlijk kan ontwikkelen
- Geprofileerd voetbed positioneert voeten correct in de schoen
- Gemaakt van hoogwaardig leer en hoogwaardige onderdelen voor ademend vermogen, comfort en slijtvastheid
- Minimale naden om wrijving te voorkomen
- Verkrijgbaar in maten 18 - 26
- Verkrijgbaar in breedte 1½ tot 8½



Model 2307

maten 18 - 26
18 - 36 maanden

Revalidatie




Korset



Orthese schoen



Anti-Varus

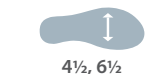

5600
Leer - Donkerblauw



9805
Lakleer - Zwart



0126
Leer - Fuchsia



6536
Leer - Rood



Klittenband Model
Leer - Fuchsia


Klittenband Modellen:

■	Lakleer - Donkerblauw	5600
■	Leer - Zwart	9805
■	Leer - Fuchsia	0126
■	Leer - Rood	6536

Model 2303


maten **18 - 26**
18 - 36 maanden

Revalidatie

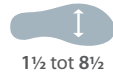

1 1/2 tot 8 1/2

Korset

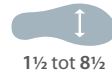


1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

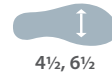

4 1/2, 6 1/2



5680
Geolied Leer - Donkerblauw



9885
Geolied Leer - Zwart



8098
Geolied Leer - Grijs



1556
Geolied Leer - Donkerbruin



Klittenband Model
Geolied Leer - Grijs

Klittenband Modellen:

	Geolied Leer - Donkerblauw	5680
	Geolied Leer - Zwart	9885
	Geolied Leer - Grijs	8098
	Geolied Leer - Donkerbruin	1556

Model 2305

maten **18 - 26**
18 - 36 maanden

Revalidatie



1 1/2 tot 8 1/2

Korset




1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

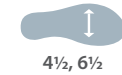

4 1/2, 6 1/2



5636
Leer - Donkerblauw



1536
Leer - Donkerbruin



9836
Leer - Zwart



8026
Leer - Grijs



Klittenband Model
Leer - Zwart


Klittenband Modellen:

	Leer - Donkerblauw	5636
	Leer - Donkerbruin	1536
	Leer - Zwart	9836
	Leer - Grijs	8026

Model 2340


maten **18 - 26**
18 - 36 maanden

Revalidatie

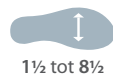

1 1/2 tot 8 1/2

Korset

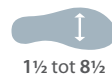


1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

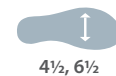

4 1/2, 6 1/2



Klittenband Model

Nubuck met rubberen neus & hak - Fuchsia

Klittenband Modellen:

- Nubuck - Fuchsia **0126**
- Lakleer - Zwart **9805**



0126
Nubuck - Fuchsia



9805
Lakleer - Zwart

Model 2342

maten **18 - 26**
18 - 36 maanden

Revalidatie



1 1/2 tot 8 1/2

Korset




1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

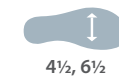

4 1/2, 6 1/2



Klittenband Model

Leer met rubberen neus & hak - Zwart

Klittenband Modellen:

- Leer - Zwart **9885**
- Leer - Donkerbruin **1536**



9885
Leer - Zwart




1536
Leer - Donkerbruin

Model 2510


maten **18 - 26**
18 - 36 maanden

Revalidatie

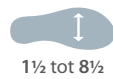

1 1/2 tot 8 1/2

Korset

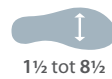


1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

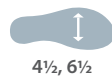

4 1/2, 6 1/2



5637
Leer - Donkerblauw



4537
Leer - Paars



6537
Leer - Rood



0136
Leer - Fuchsia



Klittenband Model
Leer - Rood

Klittenband Modellen:

	Leer - Donkerblauw	5637
	Leer - Paars	4537
	Leer - Rood	6537
	Leer - Fuchsia	0136

Model 2300

maten **18 - 26**
18 - 36 maanden

Revalidatie



1 1/2 tot 8 1/2

Korset




1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

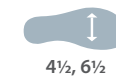

4 1/2, 6 1/2



4537
Leer - Paars



6537
Leer - Rood



5637
Leer - Donkerblauw



Klittenband Model
Leer - Rood

Klittenband Modellen:

	Leer - Paars	4537
	Leer - Rood	6537
	Leer - Donkerblauw	5637

24 - 36

Maatrange

3 - 8 jaar

Ontworpen voor kinderen tussen de 3 - 8 jaar. Kinderen in deze leeftijdsgroep zijn doorgaans standvastige lopers, ze hebben goede flexibiliteit en de boog van de voet is begonnen zich te vormen. Op deze jonge leeftijd zijn de voeten van kinderen nog steeds vrij zwak en hebben goede voetondersteuning nodig om een natuurlijke gezonde voetontwikkeling te bevorderen.

De 24 - 36 collectie is onze grootste collectie orthopedische modellen voor kinderen, met een brede selectie zoals casual, "back to school" schoenen, laarzen, en onze populaire sportschoenen.

Kenmerken:

- Extra hiel en zoolrigiditeit voor meer voetondersteuning
- Flexibele voorvoet voor natuurlijke tred ontwikkeling
- Ondersteunt de malleoli en helpt het enkelgewricht te controleren
- Helpt een goede houding te bevorderen
- Biedt alle hiel- en teenruimte waar nodig is zodat de voet zich natuurlijk kan ontwikkelen
- Geprofileerd voetbed positioneert voeten correct in de schoen
- Gemaakt van hoogwaardig leer en onderdelen voor ademend vermogen, comfort en slijtvastheid
- Minimale naden om wrijving te voorkomen
- Verkrijgbaar in maten 24 - 36
- Verkrijgbaar in breedte 1½ tot 8½



Model 2482

maten 24 - 36

3 - 8 jaar

Revalidatie



1½ tot 8½

Korset




1½ tot 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

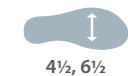

4½, 6½



9826
Leer Nubuck - Zwart



6536
Leer Nubuck - Rood



4526
Leer Nubuck - Paars



0126
Leer Nubuck - Fuchsia



Klittenband Model
Leer Nubuck- Paars


Klittenband Modellen:

●	Leer Nubuck - Zwart	9826
●	Leer Nubuck - Rood	6536
●	Leer Nubuck - Paars	4526
●	Leer Nubuck - Fuchsia	0126

Model 2494


maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie

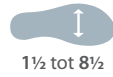

1 1/2 tot 8 1/2

Korset

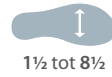


1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

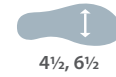

4 1/2, 6 1/2



5637
Leer Nubuck - Donkerblauw



6537
Leer Nubuck - Rood



4537
Nubuck - Paars



Klittenband Model
Leer Nubuck - Rood

Klittenband Modellen:

■	Leer Nubuck - Donkerblauw	5637
■	Leer Nubuck - Rood	6537
■	Nubuck - Paars	4537

Model 2492

maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie



1 1/2 tot 8 1/2

Korset




1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

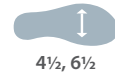

4 1/2, 6 1/2



5637
Leer Nubuck - Donkerblauw



4537
Leer Nubuck - Paars



6537
Leer Nubuck - Rood



0136
Leer Nubuck - Fuchsia



Klittenband Model
Leer Nubuck - Rood


Klittenband Modellen:

■	Leer Nubuck - Donkerblauw	5637
■	Leer Nubuck - Paars	4537
■	Leer Nubuck - Rood	6537
■	Leer Nubuck - Fuchsia	0136

Model 2500


maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie

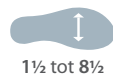

1½ tot 8½

Korset

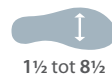


1½ tot 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

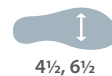

4½, 6½



5636
Leer Nubuck - Donkerblauw Combi



9836
Leer Nubuck - Zwart Combi



1526
Leer Nubuck - Donkerbruin Combi



Klittenband Model
Leer Nubuck - Zwart Combi

Klittenband Modellen:

-  Leer Nubuck - Donkerblauw Combi **5636**
-  Leer Nubuck - Zwart Combi **9836**
-  Leer Nubuck - Donkerbruin Combi **1526**

Model 2502

maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie



1½ tot 8½

Korset



1½ tot 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus



4½, 6½



9836
Geolied Leer - Zwart Combi



1526
Geolied Leer - Donkerbruin Combi



5636
Geolied Leer - Donkerblauw Combi



Klittenband Model
Geolied Leer - Donkerbruin Combi


Klittenband Modellen:

-  Geolied Leer - Zwart Combi **9836**
-  Geolied Leer - Donkerbruin Combi **1526**
-  Geolied Leer - Donkerblauw Combi **5636**

Model 2484

maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie

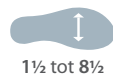


Korset



Orthese schoen



Anti-Varus

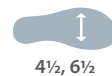

Model 2484

maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie




Korset



Orthese schoen



Anti-Varus

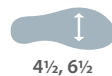

9802
Nubuck - Zwart



9804
Geoliede Nubuck - Zwart



1502
Nubuck - Donkerbruin



1501
Geoliede Nubuck - Donkerbruin



2002
Nubuck - Camel



5602
Nubuck - Donkerblauw



Klittenband Model
Nubuck - Donkerblauw

Klittenband Modellen:

- Nubuck - Zwart
- Nubuck - Donkerbruin
- Nubuck - Camel

9802
1502
2002


- Nubuck - Donkerblauw
- Geoliede Nubuck - Zwart
- Geoliede Nubuck - Donkerbruin

5602
9804
1501

Model 2504


maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie

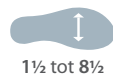

1 1/2 tot 8 1/2

Korset

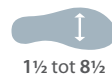


1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

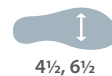

4 1/2, 6 1/2



8025
Leer Nubuck - Grijs Combi



5665
Leer Nubuck - Donkerblauw Combi



1509
Leer Nubuck - Donkerbruin Combi



Klittenband Model
Leer Nubuck - Donkerblauw Combi

Klittenband Modellen:

-  Leer Nubuck - Grijs Combi
-  Leer Nubuck - Donkerblauw Combi
-  Leer Nubuck - Donkerbruin Combi

8025

5665

1509

Model 2606

maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie



1 1/2 tot 8 1/2

Korset




1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

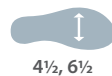

4 1/2, 6 1/2



6536
Leer Nubuck - Rood



0126
Leer Nubuck - Fuchsia




4536
Leer Nubuck - Paars

Model 2608


maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie

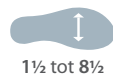

1 1/2 tot 8 1/2

Korset

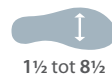


1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

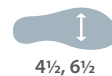

4 1/2, 6 1/2



9836
Leer Nubuck - Zwart Combi

Model 2610

maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie



1 1/2 tot 8 1/2

Korset




1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

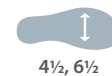

4 1/2, 6 1/2



9836
Geolied Leer- Zwart Combi



1536
Leer Nubuck - Donkerbruin Combi



5636
Leer Nubuck- Donkerblauw Combi



1536
Geolied Leer - Cognac Combi



5636
Geolied Leer - Donkerblauw Combi



8036
Leer Nubuck - Grijs Combi




8036
Geolied Leer - Grijs Combi

Model 2514


maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie

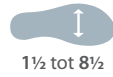

1 1/2 tot 8 1/2

Korset

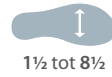


1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

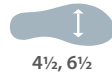

4 1/2, 6 1/2



9802
Nubuck - Zwart



1502
Nubuck - Donkerbruin



8002
Nubuck - Donkerblauw



4537
Leer - Paars



Gesp Model
Nubuck - Zwart



0136
Leer - Fuchsia

Gesp Modellen:

■	Nubuck - Zwart	9802
■	Nubuck - Donkerbruin	1502
■	Nubuck - Donkerblauw	8002

■	Leer - Paars	4537
■	Leer - Fuchsia	0136

Model 2034

maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie



1 1/2 tot 8 1/2

Korset




1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

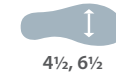

4 1/2, 6 1/2



9957
Leer - Wit Kobalt Combi



9960
Leer - Wit Blauw Combi



5736
Leer Nubuck - Kobalt Combi



0336
Leer Nubuck - Fuchsia Combi



Klittenband Model
Leer Nubuck - Kobalt Combi



9885
Leer - Zwart Combi

Klittenband Modellen:


□	Leer - Wit Kobalt Combi	9957
□	Leer - Wit Blauw Combi	9960
■	Leer Nubuck - Kobalt Combi	5736

■	Leer Nubuck - Fuchsia Combi	0336
■	Leer - Zwart Combi	9885

Model 2036


maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie

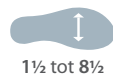

1½ tot 8½

Korset

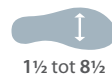


1½ tot 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

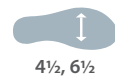

4½, 6½



0126
Leer - Fuchsia Combi



4526
Leer - Paars Combi



5736
Leer - Kobalt Combi



6557
Leer - Rood Combi



9885
Leer - Zwart Combi



9966
Leer - Wit Rood Combi

Model 2036

maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie



1½ tot 8½

Korset




1½ tot 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

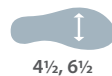

4½, 6½



Klittenband Model
Leer - Wit Rood Combi

Klittenband Modellen:

- Leer - Fuchsia Combi
- Leer - Kobalt Combi
- Leer - Zwart Combi

0126
5736
9885

- Leer - Wit Rood Combi
- Leer - Paars Combi
- Leer - Rood Combi

9966
4526
6557

Model 2105 **veter**
2115 **klittenband**

maten **24 - 36**
3 - 8 jaar

Revalidatie

Korset

Orthese schoen

Anti-Varus

2½, 4½, 6½, 8½

2½, 4½, 6½, 8½

S - M - L

4½, 6½



2105 **5612**
Leer - Donkerblauw



2115 **5612**
Leer - Donkerblauw



2105 **0112**
Leer - Fuchsia



2115 **0112**
Leer - Fuchsia



2105 **1512**
Leer - Donkerbruin



2115 **1512**
Leer - Donkerbruin

Model 2124 **veter**
2114 **klittenband**

maten **24 - 36**
3 - 8 jaar

Revalidatie

Korset

Orthese schoen

Anti-Varus

2½, 4½, 6½, 8½

2½, 4½, 6½, 8½

S - M - L

4½, 6½



2124 **5700**
Leer - Kobalt



2114 **5700**
Leer - Kobalt



2124 **0100**
Leer - Fuchsia



2114 **0100**
Leer - Fuchsia



2124 **1500**
Leer - Donkerbruin




2114 **1500**
Leer - Donkerbruin

Model 2123

maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie

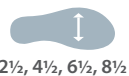

2½, 4½, 6½, 8½

Korset



2½, 4½, 6½, 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus



4½, 6½



5736
Leer - Kobalt Combi



0126
Leer - Fuchsia Combi



9807
Leer - Zwart Geel Combi



9826
Leer - Zwart Fuchsia Combi




1900
Leer - Camel Combi

Model 2133

maten 24 - 36
3 - 8 jaar

Revalidatie

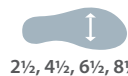

2½, 4½, 6½, 8½

Korset



2½, 4½, 6½, 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus



4½, 6½



5736
Leer - Kobalt Combi



0126
Leer - Fuchsia Combi



9807
Leer - Zwart Geel Combi



9826
Leer - Zwart Fuchsia Combi



1900
Leer - Camel Combi

34 - 42

Maatrange

8 + jaar

Ontworpen voor de oudere kinderen in de leeftijd 8+. Modellen van de laatste mode trend zullen het eenvoudig maken om een model te vinden die voldoet aan de wensen van deze leeftijdsgroep die nog steeds ondersteuning nodig heeft. Vol met nieuwe stijlen met dezelfde hoogwaardige werking en kwaliteit, uitstekende ondersteuning en pasvorm die u kunt verwachten van Pedro® kinder schoenen.

Kenmerken:

- Extra zoolrigiditeit voor meer voetondersteuning
- Ondersteunt de malleoli en helpt het enkelgewricht te controleren
- Helpt een goede houding te bevorderen
- Biedt alle hiel- en teenruimte die nodig is zodat de voet zich natuurlijk kan ontwikkelen
- Geprofileerd voetbed positioneert voeten correct in de schoen
- Gemaakt van hoogwaardig leer en hoogwaardige onderdelen voor ademend vermogen, comfort en slijtvastheid
- Minimale naden om wrijving te voorkomen
- Verkrijgbaar in maten 34 - 42
- Verkrijgbaar in wijdte 1½ tot 8½



Model 2483

maten 34 - 42

8 + jaar

Revalidatie




Korset



Orthese schoen



Anti-Varus

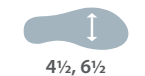

9802
Nubuck - Zwart



9800
Leer - Zwart



2002
Nubuck - Camel



1402
Nubuck - Donkerbruin



Klittenband Model
Nubuck - Camel



0102
Nubuck - Fuchsia

Klittenband Modellen:


- | | | |
|---|----------------|-------------|
| ■ | Nubuck - Zwart | 9802 |
| ■ | Leer - Zwart | 9800 |
| ■ | Nubuck - Camel | 2002 |

- | | | |
|---|----------------------|-------------|
| ■ | Nubuck - Donkerbruin | 1402 |
| ■ | Nubuck - Fuchsia | 0102 |

Model 2496


maten **34 - 42**
8 + jaar

Revalidatie

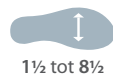

1 1/2 tot 8 1/2

Korset

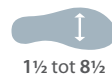


1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

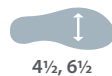

4 1/2, 6 1/2



9826
Leer Nubuck - Zwart



5636
Leer Nubuck - Donkerblauw



0126
Leer Nubuck - Fuchsia



4536
Leer Nubuck - Paars



Klittenband Model
Leer Nubuck - Fuchsia



6536
Leer - Rood

Klittenband Modellen:

■	Leer Nubuck - Zwart	9826
■	Leer Nubuck - Donkerblauw	5636
■	Leer Nubuck - Fuchsia	0126

■	Leer Nubuck- Paars	4536
■	Leer - Rood	6536

Model 2498

maten **34 - 42**
8 + jaar

Revalidatie



1 1/2 tot 8 1/2

Korset




1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

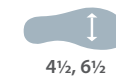

4 1/2, 6 1/2



9826
Leer - Zwart Combi



8026
Leer - Grijs Combi



1526
Leer - Donkerbruin Combi



Klittenband Model
Leer - Grijs Combi


Klittenband Modellen:

■	Leer - Zwart Combi	9826
■	Leer - Grijs Combi	8026
■	Leer - Donkerbruin Combi	1526

Model 2508


maten **34 - 42**
8 + jaar

Revalidatie

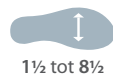

1 1/2 tot 8 1/2

Korset

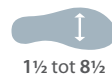


1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

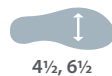

4 1/2, 6 1/2



9885
Leer - Zwart



1556
Leer - Donkerbruin



8056
Leer - Grijs



2000
Leer - Cognac



Klittenband Model
Leer - Grijs



5601
Leer - Donkerblauw

Klittenband Modellen:

	Leer - Zwart	9885
	Leer - Donkerbruin	1556
	Leer - Grijs	8056

	Leer - Cognac	2000
	Leer - Donkerblauw	5601

Model 2506

maten **34 - 42**
8 + jaar

Revalidatie



1 1/2 tot 8 1/2

Korset




1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

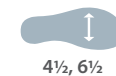

4 1/2, 6 1/2



9836
Leer Nubuck - Zwart Combi



8026
Leer Nubuck - Grijs Combi



5636
Leer Nubuck - Donkerblauw Combi



1526
Leer Nubuck - Donkerbruin Combi



Klittenband Model
Leer Nubuck - Donkerblauw Combi


Klittenband Modellen:

	Leer Nubuck - Zwart Combi	9836
	Leer Nubuck - Grijs Combi	8026
	Leer Nubuck - Donkerblauw Combi	5636
	Leer Nubuck - Donkerbruin Combi	1526

Model 2038


maten **34 - 42**
8 + jaar

Revalidatie

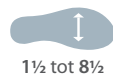

1½ tot 8½

Korset

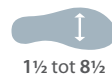


1½ tot 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

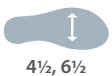

4½, 6½



4526
Leer - Paars Combi



9836
Leer - Zwart Combi



0126
Leer - Fuchsia Combi



5636
Leer - Donkerblauw Combi



Klittenband Model
Leer - Fuchsia Combi



9936
Leer - Wit Combi

Klittenband Modellen:

	Leer - Paars Combi	4526
	Leer - Zwart Combi	9836
	Leer - Fuchsia Combi	0126

	Leer - Donkerblauw Combi	5636
	Leer - Wit Combi	9936

Model 2027

maten **34 - 42**
8 + jaar

Revalidatie



1½ tot 8½

Korset




1½ tot 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

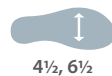

4½, 6½



4526
Leer - Paars Combi



9885
Leer - Zwart Combi



0126
Leer - Fuchsia Combi



5736
Leer - Kobalt Combi



Klittenband Model
Leer - Fuchsia Combi



9957
Leer - Wit Combi

Klittenband Modellen:

	Leer - Paars Combi	4526
	Leer - Zwart Combi	9885
	Leer - Fuchsia Combi	0126

	Leer - Kobalt Combi	5736
	Leer - Wit Combi	9957

Model 2105
2115

veter
klittenband

maten **34 - 42**
8 + jaar

Revalidatie

Korset

Orthese schoen

Anti-Varus

2½, 4½, 6½, 8½
2½, 4½, 6½, 8½
S - M - L
4½, 6½

Model 2124
2114

veter
klittenband

maten **34 - 42**
8 + jaar

Revalidatie

Korset

Orthese schoen

Anti-Varus

2½, 4½, 6½, 8½
2½, 4½, 6½, 8½
S - M - L
4½, 6½



2105 **5612**
Leer - Donkerblauw



2115 **5612**
Leer - Donkerblauw



2124 **5700**
Leer - Kobalt



2114 **5700**
Leer - Kobalt



2105 **0112**
Leer - Fuchsia



2115 **0112**
Leer - Fuchsia



2124 **0100**
Leer - Fuchsia



2114 **0100**
Leer - Fuchsia



2105 **1512**
Leer - Donkerbruin



2115 **1512**
Leer - Donkerbruin



2124 **1500**
Leer - Donkerbruin




2114 **1500**
Leer - Donkerbruin

Model 2123


Maten **34 - 42**
8 + jaar

Revalidatie

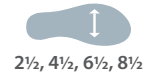

2½, 4½, 6½, 8½

Korset

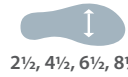


2½, 4½, 6½, 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

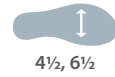

4½, 6½



5736
Leer - Kobalt Combi



0126
Leer - Fuchsia Combi



9807
Leer - Zwart Geel Combi



9826
Leer - Zwart Fuchsia Combi




1900
Leer - Camel Combi

Model 2133


Maten **34 - 42**
8 + jaar

Revalidatie

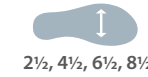

2½, 4½, 6½, 8½

Korset

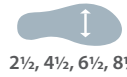


2½, 4½, 6½, 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

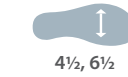

4½, 6½



5736
Leer - Kobalt Combi



0126
Leer - Fuchsia Combi



9807
Leer - Zwart Geel Combi



9826
Leer - Zwart Fuchsia Combi



1900
Leer - Camel Combi

18 - 46

Maatrange


Alle leeftijden




Model 2481

maten 18 - 46
Alle leeftijden

Revalidatie

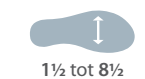


Korset

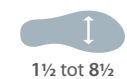

Orthese schoen



Anti-Varus

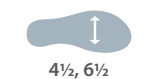

9836
Leer Nubuck - Zwart



5602
Nubuck - Donkerblauw



0102
Nubuck - Fuchsia



4502
Nubuck - Paars



Klittenband Model
Nubuck - Fuchsia

Kenmerken

- Anti loopzolen
- Verkrijgbaar in maten 18 tot 46
- Aanpasbaar – zie pagina 88 - 89 voor onze schoen aanpassingen
- Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor een comfortabele pasvorm
- Bestellen van onparen mogelijk
- Verkrijgbaar in wel 8 breedte maten per model
- Op maat gemaakte items verstuurd binnen 14 - 21 dagen


Klittenband Modellen:

●	Leer Nubuck - Zwart	9836
●	Nubuck - Donkerblauw	5602
●	Nubuck - Fuchsia	0102
●	Nubuck - Paars	4503

Model 2480


maten **18 - 46**
Alle leeftijden

Revalidatie

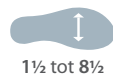

1½ tot 8½

Korset

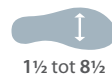


1½ tot 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

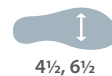

4½, 6½

Model 2480

maten **18 - 46**
Alle leeftijden

Revalidatie



1½ tot 8½

Korset




1½ tot 8½

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

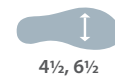

4½, 6½



5636
Nubuck Leer - Donkerblauw



0126
Nubuck Leer- fuchsia



1462
Nubuck Leer - Donkerbruin



5611
Leer Nubuck - Donkerblauw



0102
Leer Nubuck - Fuchsia



9800
Leer - Zwart



1426
Leer Nubuck - Donkerbruin



Klittenband Model
Leer Nubuck - Donkerblauw

Klittenband Modellen:

■	Nubuck Leer - Donkerblauw	5636
■	Nubuck Leer - Fuchsia	0126
■	Leer Nubuck - Donkerblauw	5611
■	Leer Nubuck - Fuchsia	0102



9805
Lakleer - Zwart


Velcro-modellen:

■	Nubuck Leer - Donkerbruin	1462
■	Leer - Zwart	9800
■	Leer Nubuck - Donkerbruin	1426
■	Lakleer - Zwart	9805

Model 2601


maten **18 - 46**
Alle leeftijden

Revalidatie

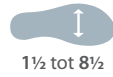

1 1/2 tot 8 1/2

Korset

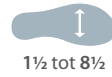


1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

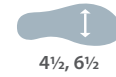

4 1/2, 6 1/2



1512
Geoliede Nubuck - Donkerbruin



5680
Leer Nubuck - Donkerblauw



1202
Leer Nubuck - Beige



Gesp Model
Leer Nubuck - Donkerblauw

Gesp Modellen:

	Geoliede Nubuck - Donkerbruin	1512
	Leer Nubuck - Donkerblauw	5680
	Leer Nubuck - Beige	1202

Model 2602

maten **18 - 46**
Alle leeftijden

Revalidatie



1 1/2 tot 8 1/2

Korset




1 1/2 tot 8 1/2

Orthese schoen



S - M - L

Anti-Varus

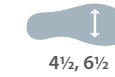

4 1/2, 6 1/2



5680
Leer Nubuck - Donkerblauw



0136
Leer Nubuck - Fuchsia



6537
Leer Nubuck - Rood



Gesp Model
Leer Nubuck - Fuchsia


Gesp Modellen:

	Leer Nubuck - Donkerblauw	5680
	Leer Nubuck - Fuchsia	0136
	Leer Nubuck - Rood	6532

Model 2604

maten 18 - 46
Alle leeftijden

Revalidatie

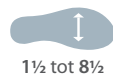


Korset



Orthese schoen



Anti-Varus

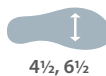

5673
Nubuck Leer - Donkerblauw Combi



1509
Leer - Donkerbruin



0136
Nubuck Leer - Fuchsia



6537
Nubuck Leer - Rood



1261
Nubuck Leer - Beige Mint Combi



010 521 5211



010 521 4961



www.piedro.com



klantenservice.nl@piedro.nl



Piedro Nederland B.V.
Jan van der Heydenstraat 18 - 20
2665 JA Bleiswijk
Nederland

Onze Essentials collectie zijn schoenen die worden geleverd uit onze uitgebreide voorraad, en worden verstuurd binnen **2-3 werkdagen**



Essentials

Wat is Piedro Essentials?

Onze Essentials Collectie bestaat uit alle modellen die in onze uitgebreide voorraad worden aangehouden. Onze voorraad omvat alle 4 populaire constructietypen:

Revalidatie

Korset

Orthese Schoen

Anti-Varus



Onze Essentials modellen kunnen direct uit de voorraad worden besteld. De voorraad bestaat uit een ruime collectie modellen die elk zijn ontworpen voor een specifiek constructietype. In onze modelselectie geven kleine pictogrammen rondom elk model de beschikbare maten, breedte en het constructietype aan. Bestellen uit onze 'Essentials' collectie betekent korte levertijden, alle voorraadmodellen worden al binnen **2-3 werkdagen geleverd!** Ook kunnen ongebruikte/ongedragen item(s) binnen 30 dagen vanaf de besteldatum in de originele verpakking aan ons worden teruggestuurd voor een restitutie of om te ruilen.

Wilt u een op bestelling gemaakt model?

Zo ja, bekijk dan onze vernieuwde Concepts collectie (pagina 14 - 64), met een levering tussen **14 - 21 werkdagen**. We hopen dat onze nieuwe collectie in de smaak valt. Mocht u hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team van de **klantenservice** op **010 521 5211**, zij zijn u graag van dienst.



code: 2297.0102
Lakleer Nubuck
Fuchsia

Revalidatie



15 - 21



3½, 5½



code: 2290.9900
Leer
Wit

Revalidatie



15 - 21



3½, 5½



code: 2298.1502
Nubuck
Bruin

Revalidatie



15 - 21



3½, 5½



code: 2333.1602
Nubuck
Taupe

Revalidatie



18 - 29



2½, 4½, 6½



code: 2338.9800
Nubuck
Zwart

Revalidatie



18 - 29



2½, 4½, 6½



code: 2338.5600
Leer
Blauw

Revalidatie



18 - 29



2½, 4½, 6½



code: 2335.0102
Leer
Fuchsia

Revalidatie



18 - 29



2½, 4½, 6½



code: 2335.9900
Leer
Wit

Revalidatie



18 - 29



2½, 4½, 6½



code: 2335.0302
Nubuck
Roze

Revalidatie



18 - 29



2½, 4½, 6½



code: 2336.0302
Nubuck
Roze

Revalidatie



18 - 29



2½, 4½, 6½



code: 2333.0102
Nubuck
Fuchsia

Revalidatie



18 - 29




2½, 4½, 6½

Bestel direct
uit de voorraad




code: 2334.9700
Lakleer
Zwart

Revalidatie

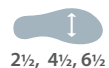


code: 2330.9800
Leer
Zwart

Revalidatie

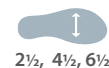


code: 2329.5302
Nubuck
Jeans

Revalidatie

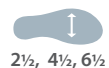


code: 2330.5302
Nubuck
Jeans

Revalidatie

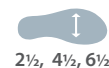


code: 2392.9700
Lakleer
Zwart

Revalidatie

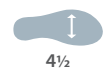

code: 2392.0302
Nubuck
Roze

Revalidatie

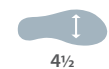

Bestel direct
uit de voorraad



code: 2266.4502
Nubuck
Paars

Revalidatie




code: 2266.5602
Nubuck
Blauw

Revalidatie



code: 2266.0102
Nubuck
Fuchsia

Revalidatie

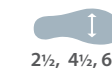

code: 2266.9802
Nubuck
Zwart

Revalidatie



Bestel direct
uit de voorraad



Nubuck
Blauw

code: 2475.5604

Revalidatie



18 - 42 1½ to 7½

code: 2575.5604

Korset



22 - 39 5½



Leer
Zwart

code: 2475.9800

Revalidatie



18 - 42 1½ to 7½

code: 2575.9800

Korset



22 - 39 5½

Bestel direct
uit de voorraad



code: 2472.9837
Leer met Croc
Zwart

Rehabilitation



24 - 39 2½, 4½, 6½



code: 2475.9804
Nubuck
Zwart

Rehabilitation



18 - 42 1½ to 7½

code: 2478.9805

Revalidatie



18 - 39 1½ to 7½

code: 2472.0102

Revalidatie



20 - 36 1½ to 7½

code: 2471.5604

Revalidatie



18 - 42 1½ tot 7½

code: 2471.9800

Revalidatie



18 - 42 1½ tot 7½

code: 2571.9800

Korset



22 - 39 5½



Lakleer
Zwart

code: 2578.9805

Korset



22 - 39 5½

code: 2978.9805

Anti-Varus



18 - 33 5½



Nubuck
Fuchsia

code: 2572.0102

Korset



22 - 39 5½

code: 2972.0102

Anti-Varus



18 - 33 5½



Nubuck
Blauw

code: 2571.5604

Korset



22 - 39 5½

code: 2971.5604

Anti-Varus



18 - 33 5½



Leer
Zwart

code: 2771.9800

Orthese schoen



23 - 42 6½

code: 2971.9800

Anti-Varus



18 - 33 5½



code: 2478.0102
Nubuck
Fuchsia

Revalidatie



18 - 39



1½ tot 7½



code: 2471.1504
Nubuck
Bruin

Revalidatie



18 - 42



1½ tot 7½



code: 3110.4502
Nubuck
Mauve

Korset



27 - 41



3½, 5½



code: 2471.9804
Nubuck
Zwart

Revalidatie



18 - 39



1½ tot 7½



code: 3111.9802
Nubuck
Zwart

Korset



27 - 41



3½, 5½



code: 2131.9801
Nubuck
Zwart

Revalidatie



24 - 46



5½



code: 2110.0199
Leer
Wit, Roze & Zilver

Revalidatie



24 - 36



5½



code: 2121.9801
Nubuck
Zwart & Grijs

Revalidatie



24 - 46



5½



code: 2110.9800
Nubuck
Zwart & Zilver

Revalidatie



24 - 36



5½



code: 2121.9900
Leer
Wit & Blauw

Revalidatie



24 - 46



5½



code: 2130.9900
Leer
Wit

Revalidatie



24 - 42



5½

Bestel direct
uit de voorraad



code: 2123.9800
Leer
Zwart

Revalidatie



26 - 43



2½, 4½, 6½, 8½




code: 2133.9800
Leer
Zwart

Revalidatie



26 - 43

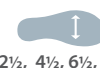

2½, 4½, 6½, 8½



code: 2124.9800
Leer
Zwart

Revalidatie



26 - 43



2½, 4½, 6½, 8½



code: 2114.9800
Leer
Zwart

Revalidatie



26 - 43



2½, 4½, 6½, 8½



code: 2105.9800
Leer
Zwart

Revalidatie



26 - 43



1½ to 7½

Bestel direct
uit de voorraad



code: 2545.0302
Nubuck
Roze

Korset



18 - 26



4½



code: 2573.0302
Nubuck
Roze

Korset



27 - 36



4½



code: 2582.5602
Nubuck
Blauw

Korset



18 - 46



4½, 5½



code: 2573.1602
Nubuck
Taupe

Korset



24 - 36




5½

Aanpassingen, voetbedden of beide?

Piedro® heeft een reeks voetbedden zowel uit de voorraad als op bestelling gemaakt. Onze RESPRO® en BioFit® inlegzolen zijn gemaakt op dezelfde leest als onze Piedro® modellen voor een perfecte pasvorm en u kunt ze tegelijk met uw schoenen bestellen.

Normale voet

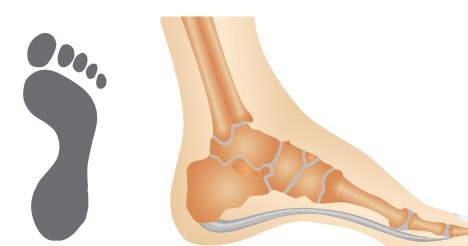

Voetbed/ inlegzool Aanbevelingen

- BioFit-pronatie
- Hielcups
- Neutrale BioFit-inlegzool
- RESPRO 3/4 lengte
- RESPRO volledige lengte

Indicaties voor gebruik:

- Preventie pronatie
- Controle

Plat voet




Voetbed/ inlegzool Aanbevelingen

- Hielcups
- Neutrale BioFit-inlegzool
- RESPRO 3/4 lengte
- RESPRO volledige lengte

Indicaties voor gebruik:

- Milde tot matige overpronatie
- Platvoet

Hol Voet

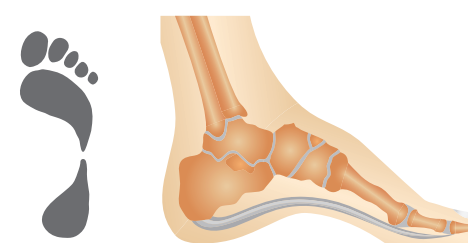

Voetbed/ inlegzool Aanbevelingen

- Dynamische BioFit-inlegzool
- RESPRO -inlegzool, voetholte gevuld, 3/4 lengte
- RESPRO-inlegzool, voetholte gevuld, volledige lengte

Indicaties voor gebruik:

- Matige tot zware overpronatie
- Holvoet

Pronatie of eversie is het naar binnen rollen van de voet (*mediale malleolus*) tijdens het lopen of rennen. Er zijn 3 hoofdtypen van pronatie in de menselijke tred:

- Neutrale pronatie
- Overpronatie
- Onderpronatie of supinatie

Neutrale pronatie

Neutrale pronatie treedt op wanneer de voet op een neutrale manier wordt afgewikkeld. In een gezonde voetbeweging wordt meer van het teengebied gebruikt tijdens het afwikkelen van de voet. In neutrale pronatie wordt het gewicht over alle tenen verdeeld, met meer nadruk op de grote en tweede teen.

Overpronatie

Iemand die overproneert wikkelt vrijwel volledig via de grote en tweede teen af. De hiel komt via de mediale zijde met een wat grotere schok neer, waardoor de enkel meer moeite heeft met het stabiliseren. Aanvullend ontstaat een onnatuurlijke hoek tussen de voet en de enkel, waarbij de voet naar binnen zakt.

Supinatie

Supinatie is het tegenovergestelde en treedt op wanneer de hiel met de laterale zijde contact maakt met de grond en de voet onvoldoende naar binnen afrolt. Het gewicht van het lichaam wordt niet verplaatst naar de grote teen waarbij de buitenkant van de voet en de kleinere tenen worden geforceerd.

Oorzaken van overpronatie:

- Tibia vara van 10° of meer
- Voor voet valgus
- Beenlengte verschil
- Verslapping van de gewrichtsbanden
- Spierzwakte
- Stijfheid in de gastrocnemius- en soleus-spier

Preventie en behandeling

Dragen van steunzolen in de schoen is een algemeen gebruikte methode om veel met pronatie samenhangende blessures te behandelen. Het voordeel van het dragen van steunzolen (*ook bekend als voetbedden of inlegzolen*) is dat de drager kan blijven sporten en ze gedurende dagelijkse activiteiten kan dragen. Steunzolen kunnen een effectieve behandeling zijn voor symptomen die voortkomen uit ongewone biomechanica in het lichaam, zoals overpronatie, wat in ongeveer de helft van de gevallen leidt tot grote verbetering of volledig herstel van de blessure*.

Gevolgen van overpronatie:

- Mediaal tibiaal stressyndroom
- Scheenbeen klachten
- Pijn in knie

** Gross ML, Davlin LB, Evanski PM (1991). "Effectiveness of orthotic shoe inserts in the long-distance runner". Am J Sports Med 19 (4): 409–12.*



Milde tot matige overpronatie.
Geleverd in paren.

Hiel Cups

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in maat 18 - 44 en geleverd in paren.
- 3 cm hielkom diepte
- Past in vrijwel elke schoen
- Biedt ondersteuning en stabilisatie voor de voet
- Bied ondersteuning aan de voet bogen
- Helpt het subtalaire en de midtarsale gewrichten te ondersteunen en stabiliseren
- Neutraal hielvlak
- Eenvoudige aan te passen
- Naviculaire vulling wordt mee geleverd

Item	Maat	Wijdte
18 - 26	3, 5, 7	HC01
27 - 44	3, 5, 7	HC02



BioFit® - Biomechanisch functioneel drievoudig inlegzoolstelsel

Als er ontwikkelingsproblemen optreden die de structurele stabiliteit van de voet beïnvloeden kan de functie ervan worden aangetast. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat permanente correctie ontstaat maar er zijn ook aanwijzingen dat een aanhoudend abnormale functie leidt tot pathologisch structurele veranderingen. Hoe langer structurele en functionele afwijkingen niet worden behandeld, des te groter zijn de risico's voor het skelet. Excessieve pronatie of supinatie kan worden beïnvloed door intrinsieke factoren zoals / valgus achtervoet / voorvoet, en extrinsieke factoren zoals alsmede ontwikkelings achterstand vanwege bijvoorbeeld een hersen aandoening. De collectie BioFit® inlegzolen passen in alle Pedro® schoenen.

Item	Maat	Wijdtes	Codes
1. Dynamische inlegzool	18 - 37	1½, 2½, 3½, 4½, 5½, 6½, 7½, 8½	98001
2. Neutrale inlegzool	18 - 27	1½, 2½, 3½, 4½, 5½, 6½, 7½, 8½	98000
3. Pronatiecontrole inlegzool	18 - 37	1½, 2½, 3½, 4½, 5½, 6½, 7½, 8½	98002
4. Wig	3° & 5°	---	98008



Dynamische BioFit® inlegzool

Overpronatie, cerebrale palsy, neurologische aandoening, ondersteuning voor de voetbogen.

- Kenmerken:**
- Gesplitste maten en breedte verkrijgbaar zonder toeslag
 - Biedt ondersteuning en stabilisatie voor de voet
 - Dynamische voetbedding
 - Diepe hielkom
 - Stabiliseert en ondersteunt het tarso-metatarsale gebied en de metatarsalia
 - Stabiliseert de hallux
 - 3.5° of 5° wigstrip verkrijgbaar - s.v.p. aanvragen bij bestelling
 - Thermoplastisch vervormbaar
 - Suède toplaag



Neutrale BioFit® inlegzool

Ondersteuning en correctie voor overpronerende voet

- Kenmerken:**
- Gesplitste maten en breedte verkrijgbaar zonder toeslag
 - Biedt ondersteuning en stabilisatie voor de voet
 - Diepe hielkom
 - Stabiliseert en ondersteunt het tarso-metatarsale gebied en de metatarsalia
 - Stabiliseert de hallux
 - 3.5° of 5° wigstrip verkrijgbaar - s.v.p. aanvragen bij bestelling
 - Enkele constructie thermoplastisch vervormbaar
 - Suède toplaag



BioFit® inlegzool voor pronatiecontrole

Biedt ondersteuning en stabilisatie voor de ontwikkelende voet

- Kenmerken:**
- Gesplitste maten en breedte verkrijgbaar zonder toeslag
 - Biedt ondersteuning en stabilisatie voor de voet
 - Specifiek geplaatst om de correcte afwikkeling van de achterzijde van de voet te ondersteunen en bevorderen in de onvolgroeide voet
 - 4 mm mediale geïntegreerde verhoging in hielvorm
 - Neutraal stabilisatieblok toegevoegd aan hiel
 - Volledig aan te passen aan de behoeften van uw patiënt
 - 3.5° of 5° wigstrip verkrijgbaar - s.v.p. aanvragen bij bestelling
 - Thermoplastisch vervormbaar
 - Suède toplaag
 - Neutrale hielkom



Neutrale BioFit® wig

Ondersteuning en correctie voor overpronerende voet



RESPRO® inlegzool
Heeft een 3/4 ondersteuning
en volledige lengte



Respro®-standaardinlegzool,
volledige en 3/4 lengte

Een reeks inlegzolen op voorraad beschikbaar in volledige en 3/4 lengte met standaard- en voetholte gevulde opties die ondersteuning en correctie bieden voor de overpronerende voet.



- Kenmerken:**
- Verkrijgbaar in modellen in volledige en 3/4 lengte
 - Standaard en voetholte gevulde opties
 - Passen in bijna alle confectie schoenen van Pedro®
 - Gevormd om ondersteuning te bieden aan de voetbogen
 - Eenvoudig aanpassingen toe te voegen
 - Diepe hielcup, indien gebruikt met Pedro® schoenen helpt de subtalaire en midtarsale gewrichten te stabiliseren
 - 3,5° en 5° wigstrips verkrijgbaar
 - Thermoplastisch vervormbaar
 - Suède toplaag
 - Verkocht in paren



Item	Maat	Wijdttes	Codes
1. Standaard volledige lengte	18 - 50	1½, 2½, 3½, 4½, 5½, 6½, 7½, 8½	98004
2. Standaard 3/4 lengte	18 - 45	1½, 2½, 3½, 4½, 5½, 6½, 7½, 8½	98005
3. Voetboog gevuld lengte	18 - 50	1½, 2½, 3½, 4½, 5½, 6½, 7½, 8½	98006
4. Voetboog gevuld 3/4 lengte	18 - 45	1½, 2½, 3½, 4½, 5½, 6½, 7½, 8½	98007



Respro® standaard

Milde tot matige overpronatie of pes planus

Een overpronerende voet absorbeert schokken niet effectief, de voetholtes zakken in en de voet rolt naar binnen. RESPRO® inlegzolen houden de voet in zijn neutrale anatomische positie en helpen het gewicht gelijkmatig over de voet te verdelen, pijn te verzachten en ondersteuning te bieden

- Kenmerken:**
- Houdt voeten in de correcte anatomische positie
 - RESPRO®-inlegzolen passen perfect in Pedro schoenen
 - Thermoplastisch vervormbaar
 - Helpt het gewicht gelijkmatig over de voet te verdelen
 - Verkrijgbaar in modellen in volledige en 3/4 lengte

Volledig ondersteunende Repro®-inlegzolen

Matig tot hoog niveau van overpronatie

Voetholte gevulde RESPRO® inlegzolen bieden een grotere mate van voetholteondersteuning dan onze standaardmodellen, omdat het voetholtegebied wordt gevuld. Voetholte gevulde modellen worden aanbevolen waar een grotere mate van controle en -ondersteuning vereist is.

- Kenmerken:**
- Helpt pijn aan voet, enkel, been, heup en onderrug die samenhangt met overpronatie te verlichten
 - RESPRO®-inlegzolen passen perfect in Pedro schoenen
 - Houdt voeten in de correcte anatomische positie
 - Helpt het gewicht gelijkmatig over de voet te verdelen
 - Verkrijgbaar in modellen in volledige en 3/4 lengte



EVA zool - Lichtgewicht zool

Port Flex



Rubbere zool

Runner



Verkrijgbaar in EVA wig kleuren:




Combineer een PU Bumper met een zool


PU Bumper



Rubbere zool - Fish

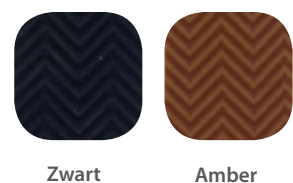


Rubbere zool - Tire

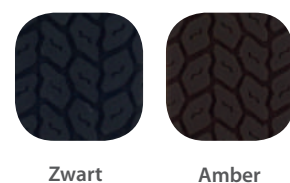

EVA zool - Astro Start

Lichtgewicht

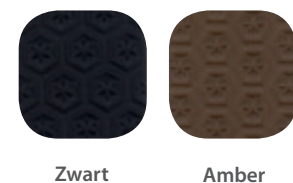

Rubbere zool

Cleo



Verzorg uw Pedro® schoenen goed.
Hier is een selectie van onze aanbevolen verzorgingsproducten.



Code: **TC001**
Collonil clean & care textielreiniger



Code: **CR001**
Collonil reinigungsrubber



Code: **WS001**
Collonil waterstop schoen crème



Code: **99001**
Pedro® Meetlat



Code: **99070**
Vervanging Pedro® schoenveters



Pedro® voetbedden
Breedten 1½ - 3½ **99050**
Breedten 4½ - 5½ **99055**
Breedten 6½ - 7½ **99060**

* S.v.p. gewenste model, maat en breedte vermelden bij bestelling.



Schoenenpoets

Zwart **PFC01**
Donkerblauw **PFC02**
Rood **PFC03**

Aanpassingen aan Pedro® schoenen worden uitgevoerd door onze eersteklas schoentechnici met behulp van onze originele hoogwaardige Pedro® materialen en onderdelen voor de best mogelijke afwerking.



B023
Zool Bumper



WS001
Rubber kruipneus



B024
Ezelsoor - Mediaal lateraal rubber

Code	Aanpassing
B001	Verhoging aan buitenkant tot 25 mm met een stoot rand
B002	Elke opvolgende 25 mm of gedeelte daarvan
B003	Verhoging aan buitenkant tot 25 mm zonder stoot rand
B004	Elke opvolgende 25 mm of gedeelte daarvan
B005	Hakverhoging tot 25 mm
B006	Hakverlaging
B007	Hielkussen of valgus / varus-wig
B008	Beugel-, hiel-, teenverhoging of schuifvaste riem
B009	Extra polstering inclusief lamsvacht gevoerde tong
B010	Verlagen schacht onder de enkel
B011	Toevoeging van een manchet om schacht te verhogen
B012	Instap vergroten richting de tenen
B013	Omzetting naar klittenband sluiting, per band
B014	Toevoeging van voering van lamswol of vergelijkbaar, per pand
B015	Toevoeging van hoge of verlengde contreforts aan de mediale of laterale zijde
B016	Toevoeging van een metatarsale versteviging
B017	Polyfasische afwikkeling / zoolverhoging
B018	Plaats zoolwig
B019	Uitgeschoorde zool
B020	Zoolverstijving in composietmateriaal
B021	Zoolverstijving in niet-composietmateriaal of verzwaarde hak
B022	Rubberen of stalen plaat aan de voorvoet van de zool of hak
B023	Gelijmde beschermer - bumper
B024	Externe beschermende veiligheidsneus / Ezelsoor
B025	Volledig of half verlengde, schuine, zwevende hak, hak-wig of verdraaide hak

* Alle schoen aanpassingen gelden voor een enkele schoen, tenzij anders aangegeven.



B008
Naviculaire Riem



B003
Generale zool verhoging



B003
Tapse zool verhoging

Code	Aanpassing
B030	Hakholte zonder voor- of achterstop
B031	Hakholte met voor- of achterstop
B033	Gevulde T- of Y-riem
B034	Dubbele T- of Y-riem
B040 A	Niet-gevormde inlegzool van volledige of 3/4 lengte in niet- schokabsorberend materiaal Bontex, plastazote enz inclusief binnenzolen van lamsvacht
B041	Metatarsale of valgus-ondersteuning of hielvulling passend bij B040A
B042	Metatarsale of valgus-ondersteuning of hielvulling vast aan de schoen
B043	Hakverhoging, kurken HDP of EVA met passende afdek materiaal
B054 A	Steunzolen op maat gemaakt - compositie materiaal
B054 B	Steunzolen op maat gemaakt - thermoplastisch materiaal
B054 C	Steunzool volledig op maat gemaakte inlegzool voor totaal contact steunzool
B056	Steunzool wiggen
B057	Oprekken van schoenen

* Alle schoen aanpassingen gelden voor een enkele schoen, tenzij anders aangegeven.

Code	Reparatie
C001	Vernieuwen interne verhoging tot 25 mm
C002	Elke volgende 25 mm of gedeelte daarvan
C011	Bovenleer opnieuw stikken per 25 mm of gedeelte daarvan
C013	Opnieuw plaatsen veteringen, haken of D-ringen per paar
C021	Zool of hak vernieuwen in synthetisch materiaal of rubber - per paar
C025	Loopzool vernieuwen, synthetisch, rubber of leer
C027	Vernieuwen stiksel op zolen - per paar

* Alle schoen aanpassingen gelden voor een enkele schoen, tenzij anders aangegeven.

Efficiënte levering

We streven ernaar om alle bestellingen van voorraad artikelen op de dag van ontvangst te versturen. Als u op maandag t/m vrijdag voor 15.00 uur een bestelling plaatst, zullen we altijd trachten om uw product op dezelfde dag te versturen, anders wordt het de volgende werkdag verstuurd. Het duurt langer om bestellingen op order of items die niet op voorraad zijn te versturen. Vanwege ons grote aantal modellen, in talrijke maten, kleuren en wijde kan het voorkomen dat het door u gekozen product niet tijdig voorradig is. In deze gevallen zullen we trachten een alternatief model aan te bieden, anders duurt de levering ongeveer 14 - 21 dagen.

Alle leveringen worden conform het verzoek van de klant verstuurd, maar kunnen niet worden gegarandeerd. Van tijd tot tijd kunnen bestellingen vertraagd zijn vanwege externe factoren zoals bijvoorbeeld de vervoerder of het weer.

Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen zijn in euro's (EUR) (€). Betaling is verschuldigd ten tijde van bestelling, voorafgaand aan verzending. Voor klanten met een Pedro® Credit Account is de betalingstermijn strikt 30 dagen vanaf de datum van onze factuur. Zie onze prijslijst voor onze volledige betalingsvoorwaarden.

Een klacht indienen

Neem eerst contact op met onze afdeling klantenservice. Zij helpen u graag bij vragen of problemen.

Retourbeleid

Als u om enige reden ontevreden bent met uw item(s), vul dan het retourformulier (op de achterzijde van uw afleverbon) in en stuur uw ongebruikte/ongedragen item(s) binnen 30 dagen vanaf de besteldatum in hun originele verpakking naar ons toe voor een restitutie of inruil (*concepts items zijn niet-restitueerbaar tenzij de schoen een productiefout bevat*). Zie onze prijslijst voor ons volledige retourbeleid.

Schoenen op maat of onparen

Alle op maat gemaakte items inclusief onparen zijn niet restitueerbaar, tenzij ze beschadigd of incompleet zijn ontvangen. Verzending van op maat gemaakt items is gewoonlijk binnen 14 - 21 dagen na bestelling.

Extra catalogus / prijslijsten

Als u of een van uw collega's een exemplaar van onze catalogus of prijslijst wenst te ontvangen, neem dan contact op met ons klantenserviceteam op 010 521 5211 of e-mail klantenservice.nl@piedro.nl.

Aanvullende informatie

Van tijd tot tijd kunnen stijlen, kleuren en prijzen enigszins verschillen. Kleine kleurvariaties kunnen ook optreden tijdens het printproces.

Leveringsopties

Neem contact op met onze afdeling klantenservice voor gedetailleerde informatie over onze leveringsdiensten, -tarieven en -voorwaarden.



Bijna **60 jaar** ervaring met specialistische
Semi Orthopedische schoenen!



010 521 5211



010 521 4961



www.piedro.com



klantenservice.nl@piedro.nl



Piedro Nederland B.V.
Jan van der Heydenstraat 18 - 20
2665 JA Bleiswijk
Nederland



always onestepahead

Bestel online, per telefoon, post of fax



t: 010 521 5211

f: 010 521 4961

www.piedro.com

klantenservice.nl@piedro.nl

Piedro Nederland B.V.

Jan van der Heydenstraat 18 - 20

2665 JA Bleiswijk

Nederland



alwaysonestepahead